

# USER GUIDE

## 超薄电子人体秤使用说明

感谢阁下的购买。


为了正确使用本产品，请在使用前仔细阅读说明书。

### 基本特性

采用高精度应变式传感器系统  
超薄秤体 (16.5mm)  
5mm钢化丝印玻璃平台  
1.14" LCD (29mm)  
最大称量值: 150 kg / 330lb

分度值: 0.1kg / 0.2lb  
免开机称重  
自动归零 / 自动关机  
电压不足 / 超载提示  
电源: 1 x 3V CR2032锂电池 (附送)

### 如何称重

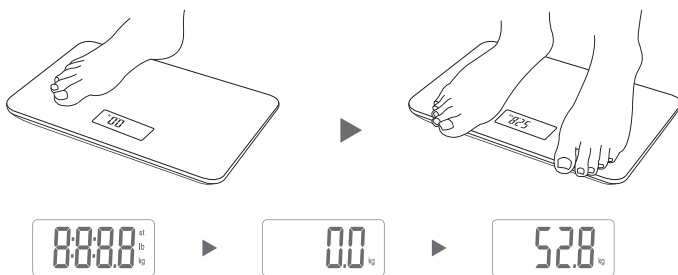

- 将秤体摆放于水平坚实的平面上。(秤体如放置不水平会导致称量不准，避免在地毯上使用。如此时秤体因振动已开机，请等待两秒后再开始称重。)
- 请平稳踏上秤面，保持身体平衡，使双脚平均分担体重。等您站稳后，秤会显示您的体重。重量闪烁2次后自动锁定画面，10秒后自动关机。



注意

当称量出现偏差时，产品需进行自检（即秤体上不可有任何物品，将产品置于地面开机一次，让产品自动关机），为确保产品在今后的使用过程中保持准确性，建议每次移动后都进行自检。

当产品在手上显示 0.0 时放到水平面上会显示产品的自身重量，此时请勿站上秤台，待显示为 0.0 后再站上秤台称重（归零时间约为 2 秒）。

### 使用须知

#### 单位转换



- 单位依次为: **kg / lb / st**
- 按动“UNIT”键进行单位转换。
- 称重前请先设置好单位，在称重时不能进行单位转换。

#### 出错提示



#### 低电压显示符号

当电池电量不能维持本产品正常使用时，屏显“Lo”后自动关机，您需要更换新电池。




#### 超载显示符号

称量超出最大称量范围时，屏显“Err”。


#### 电池装拆




打开电池门

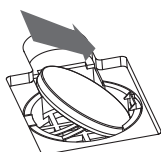

往倒钩端斜插入正极电池

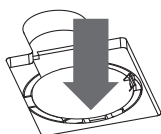

压平电池于电池箱

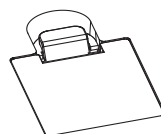

安装完毕



必须要按电池箱里的符号标识装电池并盖好电池门。电池的极性装反可能会对本产品的电子部分造成永久损害。

### 注意事项

- 请水平放置本产品。请勿在本产品上堆放物品。
- 称重时要保持身体平稳，请勿晃动身体。
- 本产品仅受静压力，请勿用力跳上秤体称重。
- 本产品仅适合家庭称体重之用，不得用于商业或其它用途。
- 所称物体请勿超过最大称量值，以免损坏产品传感器。
- 请勿使用化学溶剂擦拭本产品，可用沾水湿布擦拭，秤内请勿进水。
- 为确保本产品的使用寿命，请勿将本产品放置在湿热的环境中。
- 如本产品在开机时无显示，请检查电池是否接触不良或需更换新电池。
- 非正常使用并受到撞击或跌落，容易损坏本产品且造成危险。
- 基于技术持续改进，产品外观或会更改，请以实物为准，更改内容恕不另行通知。

▲ 正常人一天中的体重会不断变化，呼吸、心率、出汗、饮食等，都会影响称量结果（早上测量更接近我们的真实体重，建议早上起床后测量体重）。